

FOREO
SWEDEN



LUNA™ 4 plus

URZĄDZENIE DO OCZYSZCZANIA TWARZY Z FUNKCJĄ
OGRZEWANIA W BLISKIEJ PODCZERWIENI



Wyposażone w dodatkowe funkcje terapii czerwonym światłem LED oraz masażu mikroprądami

ONLINE MANUAL

PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIERWSZE KROKI

Gratulujemy zakupu nowego urządzenia LUNA™ 4 plus – cieszymy się, że dołączasz do milionów osób na całym świecie, które w inteligentny sposób dbają o swoje zdrowie. Zanim zaczniesz cieszyć się nowym życiem dzięki zapewniającej profesjonalne efekty, zaawansowanej technologii pielęgnacji skóry w zaciszu swojego domu, poświęć kilka chwil na uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Oto przyszłość pielęgnacji skóry.

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI i używać tego produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.

⚠ **OSTRZEŻENIE!** MODYFIKACJA TEGO URZĄDZENIA JEST ZABRONIONA.

LUNA™ 4 plus – WPROWADZENIE

Poznaj model LUNA™ 4 plus – najbardziej zaawansowane urządzenie 4 w 1 do profesjonalnej pielęgnacji skóry. Urządzenie do oczyszczania twarzy z funkcją ogrzewania w bliskiej podczerwieni wyposażono w dodatkowe funkcje terapii czerwonym światłem LED, które rozszerza pory, zapewniając głębsze oczyszczanie i stymulując produkcję kolagenu, a także likwidując drobne zmarszczki oraz uszkodzenia spowodowane słońcem. Ukierunkowany masaż mikroprądami tonizuje mięśnie twarzy, wyraźnie zmniejszając widoczność drobnych zmarszczek i ujędrniając skórę oraz zapewniając jej jędrny, młody wygląd.

Pluszowy silikon – 35 razy bardziej higieniczny od nylonu – w połączeniu z regulowaną częstotliwością pulsacji T-Sonic™ umożliwia przeprowadzanie w pełni spersonalizowanych zabiegów z wykorzystaniem 5 procedur ze wskazówkami oraz 5 procedur ręcznych do wyboru, przy zastosowaniu 16 poziomów intensywności mikroprądów. Usuń zanieczyszczenia, tłuszcz i nadmiar sebum w ciągu zaledwie 1 minutę, a następnie zastosuj zaawansowane mikroprądy ujędrniające, aby uzyskać świeżą, gładką i młodziej wyglądającą skórę.

Urządzenie LUNA™ 4 plus zapewnia do 100 zastosowań na jednym ładowaniu USB i jest wyposażone we wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii oraz blokadę podrózną, a wspaniały wygląd tej w 100% wodoodpornej konstrukcji jest zasługą eleganckiego, szwedzkiego designu – urządzenie stworzono po to, by zapewnić bezproblemową, domową pielęgnację najwyższej klasy, dzięki której Twoja skóra będzie za każdym razem promienna i nieskazitelnie piękna.

Model LUNA™ 4 plus Sensitive - do skóry wrażliwej, podatnej na stany zapalne, zaczerwienienia, swędzenie i suchość

Model LUNA™ 4 plus Normal - do skóry normalnej, zdrowej, odznaczającej się doskonałą równowagą hydrolipidową i niesprawiającej wrażenia ani zbyt suchej, ani zbyt tłustej



Model LUNA™ 4 plus Normal

Model LUNA™ 4 plus Sensitive

POZNAJ SWOJE URZĄDZENIE LUNA™ 4 plus

PULSACJE T-SONIC™

Usuń zanieczyszczenia, tłuszcz i pozostałości makijażu w ciągu 1 minuty, zwiększając przy tym wchłanianie aktywnych składników

THERMO-TECH

Bliska podczerwień w połączeniu z czerwonym światłem LED rozgrzewa skórę, rozszerzając pory i zapewniając głębsze oczyszczenie

EKSTRAMIĘKKI I ULTRAHIGIENICZNY SILIKON

35 razy bardziej higieniczny niż włosie nylonowe, odpowiedni do każdego rodzaju skóry. Nie zawiera BPA ani ftalanów

ELEGANCKIE SZWEDZKIE WZORNICTWO

Dopasowana do każdego rodzaju skóry, nie trzeba wymieniać główek szczoteczki

LAMPKA KONTROLNA

Miga, aby wskazać, kiedy urządzenie działa w trybie masażu ujędrniającego oraz kiedy należy je naładować.

KOŃCÓWKI Z MIKROPRĄDAMI

Dostarczają mikroprądy bezpośrednio do skóry, gwarantując nieinwazyjne odmładzanie

TRYB MASAŻU

Usuwa widoczne oznaki starzenia, napinając skórę i tonizując mięśnie twarzy

PRZYCIŚK ZASILANIA

Krótkie naciśnięcie włącza i wyłącza urządzenie, natomiast podwójne naciśnięcie włącza tryb masażu ujędrniającego

PRZYCIŚKI WYBORU TRYBU

Łatwe przełączanie między trybami oczyszczania (delikatny, normalny i głęboki) oraz wariantami masażu (gdy aktywny jest tryb masażu)

GNIAZDO ŁADOWANIA

Do 100 zastosowań na jedno ładowanie. 100% wodoodporna obudowa



INTERAKTYWNA APLIKACJA FOREO

Kontroluj ustawienia urządzenia i wybierz swoje ulubione warianty masażu oczyszczającego oraz ujędrniającego



PRZEWÓD USB

Ładuj kiedy i gdzie chcesz



PODRÓŻNE ETUI

Wygodne przechowywanie urządzenia do pielęgnacji skóry w podróży



PRÓBKA SERUM, 2 ML

Do użytku w trybie mikroprądów w celu zapewnienia optymalnej przewodności i lepszych efektów

ODBLOKOWANIE URZĄDZENIA

Przed pierwszym użyciem pobierz aplikację mobilną FOREO For You, aby aktywować i zarejestrować swoje urządzenie w kilku prostych krokach;

1. Pobierz aplikację FOREO For You na swoje urządzenie mobilne
2. Zaloguj się na swoje konto lub załóż nowe
3. Dodaj urządzenie (u góry ekranu)
4. Wybierz serię swojego urządzenia
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby połączyć urządzenie z aplikacją mobilną
6. Uzupełnij informacje dotyczące zakupu


Twoje urządzenie jest gotowe do użycia!

www.foreo.com/app



APLIKACJA MOBILNA FOREO FOR YOU

Aplikacja mobilna FOREO For You dostarcza wskazówek na temat użytkowania i dbania o urządzenie LUNA™ 4 plus. Za jej pomocą można kontrolować ustawienia, uzyskać dostęp do procedur ze wskazówkami wideo oraz znaleźć swoje urządzenie w razie jego zagubienia.

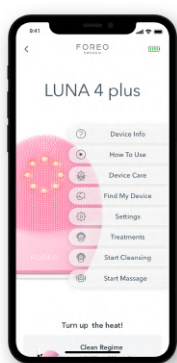

USTAWIENIA

Ustaw swoje preferencje dla trybów oczyszczania i masażu, a urządzenie zapamięta je do użytku w trybie offline;

USTAWIENIA TRYBU OCZYSZCZANIA

Ustaw czas trwania oczyszczania na maksymalnie 240 sekund oraz intensywność pulsacji T-Sonic™ dla każdego z trybów oczyszczania:

- **Delikatne oczyszczanie:** niski poziom, poziomy 1–5 intensywności pulsacji T-Sonic™
- **Normalne oczyszczanie:** średni poziom, poziomy 6–10 intensywności pulsacji T-Sonic™
- **Głębokie oczyszczanie:** wysoki poziom, poziomy 11–16 intensywności pulsacji T-Sonic™




USTAWIENIA TRYBU MASAŻU

Ustawiaj czas trwania masażu na maksymalnie 15 minut, wybierając częstotliwość pulsacji T-Sonic™ i poziom intensywności mikroprądów, a także wybieraj spośród 5 różnych wariantów masażu dla każdego z poniższych trybów masażu:

- **Delikatny masaż:** niski poziom, poziomy 1–5 intensywności pulsacji T-Sonic™ i mikroprądów
- **Normalny masaż:** średni poziom, poziomy 6–10 intensywności pulsacji T-Sonic™ i mikroprądów
- **Głęboki masaż:** wysoki poziom, poziomy 11–16 intensywności pulsacji T-Sonic™ i mikroprądów

Możesz wyłączyć technologię mikroprądów dla wszystkich 3 trybów, jeśli chcesz korzystać wyłącznie z masażu z pulsacjami T-Sonic™.

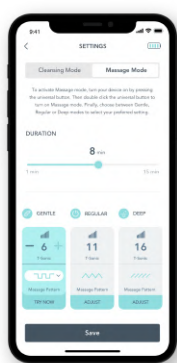


Funkcje „Rozpocznij oczyszczanie” i „Rozpocznij masaż” oferują tryb lustra, który pozwala używać urządzenia mobilnego jako lustra podczas wykonywania zabiegów oczyszczania lub masażu.

ZABIEGI

Wybierz spośród 5 zaprogramowanych procedur masażu i postępuj zgodnie ze wskazówkami wideo.

1. **Tonizacja całej twarzy:** podnosi i ujędźnia całą twarz (2 min)
2. **Zabieg na oczy:** poprawia kontur oczu (4 min)
3. **Linia śmiechu:** wygładza linie śmiechu i okolice ust (6 min)
4. **Wygładzanie czoła:** zabieg na brwi i czoło (2 min)
5. **Magiczne usta:** poprawia kształt ust i policzków (5 min)

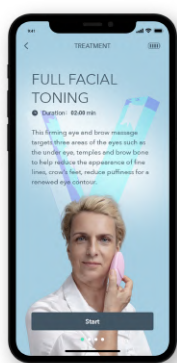

SPOSÓB UŻYCIA URZĄDZENIA LUNA™ 4 plus

TRYB OCZYSZCZAJĄCY

1. Dokładnie usuń makijaż, zwilż skórę, a następnie nałóż żel do twarzy FOREO.
2. Naciśnij przycisk zasilania, aby aktywować tryb oczyszczania, a także z łatwością przełączać się między trybami delikatnego i głębokiego oczyszczania, naciskając przyciski  lub .
3. Przesuwaj końcówki urządzenia LUNA™ 4 plus po twarzy okrężnymi ruchami, aż do momentu wyłączenia urządzenia przez wbudowany timer.
4. Spłucz i delikatnie osusz twarz.



TRYB MASAŻU UJĘDRNIAJĄCEGO

1. Nałóż serum FOREO na czystą, suchą skórę.
2. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie, a następnie szybko naciśnij go dwa razy, aby aktywować tryb masażu ujędrniającego. Z łatwością przełączaj się między zapisanymi trybami masażu, naciskając przyciski  lub .
3. Rozluźnij twarz i przesuwaj po skórze powierzchnię masująco-ujędrniającą urządzenia LUNA™ 4 plus ruchami na zewnątrz, zgodnie z kształtem Twojej twarzy, aż do momentu wyłączenia urządzenia przez wbudowany timer.
4. Kontynuuj dalej swoją pielęgnacyjną rutynę.



OSTRZEŻENIE! Przed włączeniem zabiegu mikroprądami urządzenie LUNA™ 4 plus musi być całkowicie suche dla bezpiecznego i skutecznego zastosowania. Przed rozpoczęciem przesuwania urządzenia LUNA™ 4 plus po skórze należy zawsze nałożyć na twarz warstwę serum przewodzącego.

UWAGA! Aby utrzymać urządzenie w optymalnym stanie, unikaj stosowania żelów do twarzy na bazie gliny, silikonu lub zawierających drobinki, żelów złuszcających lub peelingu, ponieważ mogą one uszkodzić delikatne, silikonowe końcówki urządzenia LUNA™ 4 plus. Jeśli długie silikonowe włosie zaplącze się, delikatnie przeczesz je w jednym kierunku, aby powróciło do swojej normalnej pozycji.

BLOKADA PODRÓŻNA

Jeśli chcesz zablokować urządzenie dla zapewnienia sobie wygody w podróży, przytrzymaj naciśnięte jednocześnie przyciski  i  przez 3 sekundy. Aby odblokować urządzenie, wykonaj tę samą procedurę.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA LUNA™ 4 plus

Po użyciu zawsze dokładnie oczyść urządzenie LUNA™ 4 plus. Umyj powierzchnię szczoteczki wodą z mydłem, a następnie spłucz ciepłą wodą. Osusz niestrzępiącą się ściereczką lub ręcznikiem. W celu uzyskania optymalnego rezultatu zalecamy spryskanie szczoteczki sprayem do czyszczenia silikonu FOREO oraz przepłukanie jej ciepłą wodą.

UWAGA! Nigdy nie należy używać środków czyszczących zawierających alkohol, benzynę lub aceton, ponieważ mogą one podrażnić skórę i uszkodzić silikon.

POLECAMY RÓWNIEŻ

Micro-Foam Cleanser



Ten żel do mycia twarzy o konsystencji kremu zamienia się w delikatne mikro-bąbelki, które usuwają zanieczyszczenia z głębi porów, delikatnie oczyszczają skórę i usuwają nadmiar sebum. Specjalna formuła, zawierająca odżywcze dla skóry aminokwasy oraz witaminę E, pomaga nawilżyć i chronić Twoją skórę oraz pozostawia uczucie miękkości i ożywienia.

PRODUKT PRZEBADANY DERMATOLOGICZNIE – BEZZAPACHOWY – WEGAŃSKI – NIETESTOWANY NA ZWIERZĘTACH

SERUM SÉRUM SERUM



Dzięki ultrałagodzącej formule przesuwanie urządzenia po skórze nie wymaga żadnego wysiłku, a dodatkowo produkt współdziała z dostępnym w urządzeniu LUNA trybem masażu ujędrniającego, w bezpieczny sposób przekazując mikroprądy z urządzenia na skórę. Przeciwułtleniająca moc skwalanu nadaje skórze zdrowy, młodzieńczy wygląd, a kwas hialuronowy zatrzymuje w skórze wilgoć, dzięki czemu staje się ona bardziej miękka, gładka i wysoce nawilżona.

PRODUKT PRZEBADANY DERMATOLOGICZNIE – BEZZAPACHOWY – NIETESTOWANY NA ZWIERZĘTACH

WAŻNE DLA OPTYMALNEGO BEZPIECZEŃSTWA

- W przypadku chorób skóry lub pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości natury medycznej, przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować, jeśli wykonane zostały zabiegi laserowe, peelingi chemiczne lub w jakikolwiek inny sposób skóra została uszkodzona lub zniszczona.
- Nie stosować, jeśli na twarzy wykonywane były zabiegi chirurgii kosmetycznej.
- Nie stosować funkcji mikroprądów w przypadku występowania jakichkolwiek schorzeń, takich jak epilepsja, choroba krwotoczna, nowotwory, guzy czy zaburzenia percepcji.
- Nie stosować funkcji mikroprądów w przypadku posiadania wszczepionych urządzeń medycznych bądź innych instrumentów elektronicznych lub wspomagających organizm.
- Nie stosować funkcji mikroprądów na klatkę piersiową/okolice piersi, okolice oczu (mięsień okrężny w obrębie oczodołu), linię środkową (kość szyi lub genitalia/okolice pachwin).
- W przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby serca należy przestrzegać środków ostrożności zaleconych przez lekarza.
- Długotrwałe skutki stosowania mikroprądów nie są znane.
- Bezpieczeństwo stosowania funkcji mikroprądów w czasie ciąży nie zostało ustalone. Jeśli jesteś w ciąży, przed użyciem tego urządzenia skonsultuj się z lekarzem.
- Podczas używania urządzenia może wystąpić złudzenie widzenia migających światła, wynikające ze stymulacji nerwu wzrokowego. Jeśli ten objaw utrzymuje się stale bez użycia urządzenia, należy skonsultować się z lekarzem.
- Elektroniczny sprzęt monitorujący, taki jak monitory EKG i alarmy EKG, może nie działać prawidłowo podczas stosowania tego urządzenia.
- Używanie urządzenia LUNA™ 4 plus powinno być wygodne – w przypadku wystąpienia dyskomfortu należy natychmiast przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas stosowania wokół okolic oczu i nie dotykaj urządzeniem powiek ani oczu.

- Ze względów higienicznych nie zalecamy udostępniania urządzenia LUNA™ 4 plus innym osobom.
- Należy unikać wystawiania urządzenia LUNA™ 4 plus na bezpośrednie działanie światła słonecznego oraz nigdy nie należy wystawiać go na działanie ekstremalnie wysokich temperatur ani nie dopuszczać do kontaktu z wrzącą wodą.
- Konieczny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez dzieci, na nich lub w ich pobliżu, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych.
- Należy przerwać użytkowanie, jeśli produkt wydaje się w jakikolwiek sposób uszkodzony. Ten produkt nie zawiera części nadających się do naprawy.
- Biorąc pod uwagę skuteczność zabiegów oczyszczających FOREO, zalecamy, aby nie używać urządzenia LUNA™ 4 plus dłużej niż 3 minuty w trybie oczyszczania.
- Nie należy stosować urządzenia w trybie mikroprądów, jeśli zostało zanurzone w wodzie. Przed aktywowaniem funkcji mikroprądów urządzenie LUNA™ 4 plus powinno być całkowicie suche.
- Podczas stosowania urządzenia może wystąpić delikatne uczucie mrowienia. Obniżenie intensywności może zmniejszyć lub wyeliminować to uczucie.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku kosmetycznego na twarzy. FOREO nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkodliwy skutek wynikający z niewłaściwego użycia, zastosowania na innych obszarach ciała, podłączenia do niewłaściwych źródeł napięcia, zanieczyszczonego roztworu przewodzącego lub końcówek bądź jakiegokolwiek innych niewłaściwych zastosowań.
- Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na konkretne pytanie lub masz jakiegokolwiek inne pytania dotyczące działania urządzenia, odwiedź stronę www.foreo.com

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JAKIE NALEŻY PODJĄĆ W PRZYPADKU ZMIAN W DZIAŁANIU URZĄDZENIA LUNA™ 4 PLUS.

Jeśli urządzenie LUNA™ 4 plus nie włącza się po naciśnięciu środkowego przycisku:

- Bateria jest rozładowana. Ładuj baterię za pomocą przewodu ładującego USB przez maksymalnie 2 godziny do całkowitego naładowania, a następnie włącz urządzenie ponownie, przytrzymując przycisk zasilania.

Jeśli nie można wyłączyć urządzenia LUNA™ 4 plus i/lub przyciski interfejsu nie działają:

- Mikroprocesor chwilowo nie działa prawidłowo. Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby ponownie uruchomić urządzenie.

Jeśli nie można zsynchronizować urządzenia LUNA™ 4 plus z aplikacją FOREO:

- Wyłącz, a następnie włącz ponownie funkcję Bluetooth, aby spróbować odzyskać połączenie.
- Zamknij aplikację FOREO, a następnie otwórz ją ponownie, aby rozpocząć proces od nowa.

WARUNKI GWARANCJI

ZAREJESTRUJ GWARANCJĘ

Aby aktywować swoją 2-letnią ograniczoną gwarancję, zarejestruj się przez aplikację FOREO lub wejdź na stronę foreo.com/product-registration, gdzie znajdziesz więcej informacji.

2-LETNIA OGRANICZONA GWARANCJA

FOREO udziela gwarancji na urządzenie na okres DWÓCH (2) LAT (z wyjątkiem krajów, w których prawo krajowe wymaga dłuższej gwarancji) od pierwotnej daty zakupu na wypadek wad wynikających z wadliwego wykonania i wad materiału przy normalnym użytkowaniu urządzenia. Gwarancja obejmuje części robocze, które mają wpływ na działanie urządzenia. NIE obejmuje ona uszkodzeń kosmetycznych spowodowanych normalnym zużyciem ani uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, niewłaściwym użytkowaniem lub zaniedbaniem. Każda próba otwarcia lub rozebrania urządzenia (bądź jego akcesoriów) spowoduje utratę gwarancji.

W przypadku wykrycia wady i powiadomienia o niej FOREO w okresie gwarancyjnym firma FOREO, według własnego uznania, bezpłatnie wymieni urządzenie. Roszczenia z tytułu gwarancji muszą być poparte odpowiednimi dowodami na to, że data zgłoszenia roszczenia mieści się w okresie gwarancyjnym. Aby potwierdzić ważność gwarancji, należy zachować oryginalny paragon zakupu wraz z niniejszymi warunkami gwarancji przez cały okres gwarancji.

Aby skorzystać z gwarancji, musisz zalogować się na swoje konto na stronie www.foreo.com, a następnie wybrać opcję zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty wysyłki nie są zwracane. Niniejsze zobowiązanie stanowi uzupełnienie ustawowych praw konsumenta i w żaden sposób nie wpływa na te prawa.

INFORMACJE O UTYLIZACJI

Utylizacja zużytego sprzętu elektronicznego (obowiązuje w UE i w innych krajach europejskich z systemami selektywnej zbiórki odpadów).




Przekreślony symbol kosza na śmieci oznacza, że urządzenie to nie powinno być traktowane jako odpad z gospodarstwa domowego, lecz powinno być oddane do odpowiedniego punktu zbiórki do recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego urządzenia, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami produktu. Recykling materiałów pomaga również chronić zasoby naturalne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu urządzenia, skontaktuj się z lokalną firmą utylizującą odpady domowe lub z miejscem zakupu.

WYJMOWANIE BATERII

UWAGA! Ten proces jest nieodwracalny. Otwarcie urządzenia spowoduje utratę gwarancji. Tę czynność należy wykonać wyłącznie, gdy urządzenie ma zostać zutylizowane.

Urządzenie ma baterię litowo-jonową, którą należy wyjąć przed utylizacją i której nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. W celu wyjęcia baterii należy zdjąć zewnętrzną warstwę silikonową, otworzyć wewnętrzną plastikową pokrywę i wyjąć baterię, która ma zostać zutylizowana zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie środowiska. Dla własnego bezpieczeństwa w trakcie tego procesu należy mieć założone rękawiczki. Szczegółowe instrukcje graficzne przedstawiono poniżej:

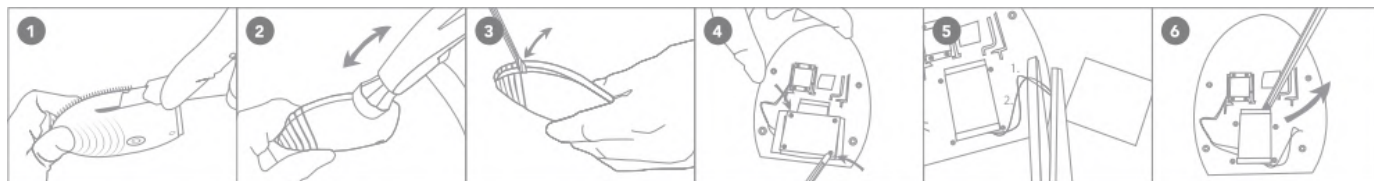

SPECYFIKACJA

MATERIAŁY:	Bezpieczny dla ciała silikon, tworzywo ABS, miedź, szkło, złoto, stop cynku
KOLOR:	Lavender, Pink
WYMIARY:	82.5*38.8*102mm
WAGA:	150g
BATERIA	Litowo-jonowa 1000 mAh 3,7 V

UŻYTKOWANIE:	do 100 zastosowań
STAN GOTOWOŚCI:	90 dni
CZĘSTOTLIWOŚĆ:	100 Hz
MAKSYMALNY POZIOM HAŁASU:	<50 dB
INTERFEJS:	3 przyciski

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: użytkownicy tego urządzenia korzystają z niego na własne ryzyko. Ani FOREO, ani jego sprzedawcy detaliczni nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia lub szkody, fizyczne lub inne, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania tego urządzenia. Ponadto FOREO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej publikacji i dokonywania okresowych zmian jej treści bez obowiązku powiadamiania jakiegokolwiek osoby o takiej zmianie lub zmianach.

Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność z normami i przepisami, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia. Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 Zasad FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie to musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

OŚWIADCZENIE O EKSPOZYCJI NA CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWE (RF): urządzenie to spełnia wymagania limitów narażenia na promieniowanie FCC określonych dla niekontrolowanego środowiska. Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełniania ogólnych wymagań w zakresie ekspozycji na RF. Urządzenie może być używane w przenośnych warunkach ekspozycji bez ograniczeń.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

PODSTAWY

1. CO NALEŻY ZROBIĆ PO OTRZYMANIU URZĄDZENIA LUNA™ 4 plus?

Gratulujemy odkrycia inteligentniejszej pielęgnacji skóry! Najpierw pobierz za darmo aplikację FOREO For You, aby odblokować i zarejestrować swoje urządzenie.

2. CO JEST DOŁĄCZONE DO URZĄDZENIA LUNA™ 4 plus?

1 urządzenie LUNA™ 4 plus, 1 przewód ładujący USB, 1 próbka SERUM SERUM SERUM 2 ml, 1 instrukcja obsługi, 1 instrukcja „Szybki start” i 1 etui podróżne.

3. JAK WŁĄCZYĆ I WYŁĄCZYĆ MOJE URZĄDZENIE LUNA™ 4 plus?

Naciśnij przycisk zasilania na urządzeniu LUNA™ 4 plus, aby je włączyć; naciśnij go ponownie, aby je wyłączyć. Po zakończeniu zaprogramowanego zabiegu urządzenie wyłączy się automatycznie.

4. TWOJE URZĄDZENIE NIE WŁĄCZA SIĘ PO NACIŚNIĘCIU PRZYCISKU ZASILANIA?

Bateria jest rozładowana. Ładuj baterię za pomocą przewodu ładującego USB do całkowitego naładowania, a następnie włącz urządzenie ponownie, przytrzymując przycisk zasilania.

5. JAK NAŁADOWAĆ MOJE URZĄDZENIE LUNA™ 4 plus?

Urządzenie LUNA™ 4 można ładować poprzez port USB, a dwugodzinne ładowanie pozwoli na maks. 70 użyć (na podstawie 1-minutowego zabiegu na jedno użycie). Do urządzenia dołączony jest przewód ładujący USB.

6. DLACZEGO KOŃCÓWKA PRZEWODU ŁADUJĄCEGO NIE WCHODZI DO KOŃCA?

Przewód ładujący przeznaczony dla urządzenia LUNA™ 4 plus nie powinien wchodzić do końca w gniazdo urządzenia. To całkowicie normalne, że nieco wystaje on z urządzenia.

7. MOJE ŁADOWANIE NIE ZAPEWNIŁO 100 UŻYĆ URZĄDZENIA.

Liczba 100 użyć odnosi się do 100 minut, dlatego czas pracy urządzenia po naładowaniu zależy od tego, jak często i jak długo urządzenie jest używane.

8. CZY PORT ŁADOWANIA W URZĄDZENIU LUNA™ 4 plus JEST WODOODPORNY?

Tak, port ładowania jest wodoszczelny, co oznacza, że urządzenia LUNA™ 4 plus można używać pod prysznicem w trybie oczyszczania. Nie można jednak korzystać pod prysznicem z trybu mikroprądów. Nie należy stosować urządzenia w trybie mikroprądów, jeśli zostało zanurzone w wodzie. Przed aktywowaniem funkcji mikroprądów urządzenie LUNA™ 4 plus powinno być całkowicie suche. Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że urządzenie jest całkowicie suche i nie używaj go podczas ładowania. Po zakończeniu korzystania z urządzenia przechowuj je w suchym miejscu. Nie pozostawiaj urządzenia zanurzonego w wodzie.

APLIKACJA

1. DLACZEGO MUSZĘ POBRAĆ APLIKACJĘ PRZED UŻYCIEM SWOJEGO URZĄDZENIA LUNA™ 4 plus?

Wszystkie produkty FOREO obsługujące aplikację należy aktywować i odblokować za pośrednictwem aplikacji FOREO For You przy pierwszym włączeniu. Pomaga nam to zapewnić ochronę przed fałszywymi/skopiowanymi produktami FOREO oraz ułatwia rejestrację gwarancji i ochronę Twojej inwestycji.

2. JAK SPAROWAĆ MOJE URZĄDZENIE LUNA™ 4 plus Z APLIKACJĄ FOREO?

Pobierz aplikację FOREO For You na smartfona lub tablet i włącz Bluetooth. Naciśnij przycisk uniwersalny na urządzeniu, aby je włączyć. Migające białe światło wskazuje, że urządzenie jest w trybie parowania. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi w aplikacji, aby zarejestrować się i sparować swoje urządzenie LUNA™ 4 plus.

3. CZY URZĄDZENIE LUNA™ 4 plus DZIAŁA BEZ APLIKACJI?

Tak! Aplikacja ułatwia zarządzanie ustawieniami urządzenia i zapewnia dostęp do masażu ze wskazówkami wideo, ale możesz również używać urządzenia LUNA™ 4 plus ręcznie. Przyciski umieszczone z tyłu urządzenia umożliwiają przełączanie z trybu oczyszczania w tryb masażu bez użycia aplikacji.

4. NIE MOGĘ ZAREJESTROWAĆ MOJEGO URZĄDZENIA LUB MOJE URZĄDZENIE CIĄGLE SIĘ ROZŁĄCZA. CO MAM ZROBIĆ?

Wykonaj poniższe kroki, aby rozwiązać problem z aplikacją FOREO For You:

- 1) Usuń i zainstaluj ponownie aplikację – być może wymaga ona jedynie aktualizacji.
- 2) Upewnij się, że system operacyjny Twojego urządzenia mobilnego został zaktualizowany do najnowszej wersji (upewnij się, że w Twoim telefonie komórkowym zainstalowana jest najnowsza aktualizacja oprogramowania).
- 3) Pamiętaj, aby po usunięciu i ponownym zainstalowaniu aplikacji uruchomić ponownie swój telefon.
- 4) Usuń pliki cookie i pamięć podręczną w telefonie.
- 5) Upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane, a funkcja Bluetooth jest włączona.

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA LUNA™ 4 plus

1. JAK CZĘSTO MOGĘ UŻYWAĆ SWOJEGO URZĄDZENIA LUNA™ 4 plus?

Urządzenia LUNA™ 4 plus są bezpieczne i wystarczająco delikatne, aby móc z nich korzystać codziennie, rano lub wieczorem. Zalecamy używanie urządzenia LUNA™ 4 plus za każdym razem, gdy Twoja skóra potrzebuje głębokiego oczyszczania. Z trybu mikroprądów nie należy korzystać częściej niż raz dziennie.

2. JAK DŁUGO MOGĘ UŻYWAĆ URZĄDZENIA DANEGO DNIA?

Biorąc pod uwagę skuteczność oczyszczania, zalecamy, aby nie używać urządzenia LUNA™ 4 plus dłużej niż 3 minuty dziennie.

3. CZY MOGĘ UDOSTĘPNIĆ URZĄDZENIE LUNA™ 4 plus INNYM OSOBOM, NA PRZYKŁAD CZŁONKOM RODZINY?

Ze względów higienicznych nie zalecamy udostępniania urządzenia LUNA™ 4 plus innym osobom.

4. CZY URZĄDZENIA LUNA™ 4 plus MOŻNA UŻYWAĆ DO USUWANIA MAKIJAŻU?

Przed przystąpieniem do oczyszczania za pomocą któregośkolwiek z naszych urządzeń należy usunąć cały makijaż.

5. Z JAKIM NACISKIEM NALEŻY PRZESUWAĆ URZĄDZENIE LUNA™ 4 plus PO SKÓRZE?

Podczas korzystania z urządzenia LUNA™ 4 plus nie ma potrzeby stosowania żadnego nacisku. Delikatnie oczyść twarz, okrężnymi ruchami oczyszczając policzki i czoło oraz przesuwając urządzenie w górę i w dół nosa.

6. CZY MOGĘ UŻYWAĆ URZĄDZENIA FOREO LUNA™ 4 plus WOKÓŁ OKOLIC OCZU?

Tak, urządzenia LUNA™ 4 plus można używać wokół okolic oczu. Należy jednak zachować szczególną ostrożność podczas stosowania urządzenia wokół okolic oczu i nie dopuszczać do kontaktu urządzenia z powiekami lub oczami. W okolicy oczu (mięsień okrężny w obrębie oczodołu) nie należy używać funkcji mikroprądów.

7. JAKIEGO RODZAJU ŻELU DO OCZYSZCZANIA TWARZY MOGĘ UŻYWAĆ?

Można stosować dowolny środek do mycia twarzy, o ile nie zawiera on składników, które mogłyby silikon urządzenia. Unikaj stosowania żelów do twarzy na bazie gliny, silikonu lub zawierających drobinki, żelów złuszczeniowych lub peelingu, ponieważ mogą one uszkodzić delikatne, silikonowe końcówki urządzenia. W celu uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy oczyszczanie za pomocą pianki oczyszczającej FOREO Micro-Foam Cleanser.

8. CZY W TRYBIE MASAŻU MIKROPRĄDAMI MUSZĘ UŻYWAĆ SERUM SERUM SERUM FOREO?

Tak, konieczne jest stosowanie SERUM SERUM SERUM z urządzeniem, ponieważ serum tworzy barierę przewodzącą, skutecznie i bezpiecznie przenosząc mikroprądy z urządzenia na skórę. SERUM SERUM SERUM ma specjalną formułę ze składnikami przewodzącymi, takimi jak gliceryna, pozwalającymi urządzeniom emitującym mikroprądy na płynną pracę bez jakiegokolwiek odczucia na skórze.

9. CZY MOGĘ UŻYWAĆ URZĄDZENIA LUNA™ 4 plus, JEŚLI MAM CHOROBE SKÓRY, TAKĄ JAK EGZEMA LUB TRĄDZIK, LUB JESTEM PO ZABIEGU KOSMETYCZNYM, TAKIM JAK BOTOKS?

Zalecamy, aby każdy, kto cierpi na poważną chorobę skóry lub przeszedł zabieg kosmetyczny, skonsultował się ze swoim lekarzem lub dermatologiem przed skorzystaniem z urządzenia.

10. CZY MOGĘ UŻYWAĆ SWOJEGO URZĄDZENIA LUNA™ 4 plus W CZASIE CIĄŻY?

Tryb oczyszczania jest bezpieczny dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią, ale tryb mikroprądów nie jest dla nich zalecany.

URZĄDZENIE LUNA™ 4 plus

1. JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI TRYBAMI OCZYSZCZANIA?

Tryby oczyszczania w urządzeniu LUNA™ 4 plus umożliwiają dostosowanie oczyszczania do konkretnych wymagań skóry – zależnie od pory roku, dnia, a nawet danego obszaru skóry. W przypadku delikatnego oczyszczania zakres pulsacji T-Sonic™ wynosi od 1 do 5, normalnego – od 6 do 10, a głębokie oczyszczanie to zakres od 11 do 16.

2. JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI TRYBAMI MASAŻU?

Urządzenie LUNA™ 4 plus udostępnia 5 nowych wariantów masażu do wyboru – każdy z nich oferuje własne wyjątkowe zalety.

1. MASAŻ Z DRENAŻEM LIMFATYCZNYM

Pobudza krążenie limfy w obrębie twarzy. Idealnie eliminuje nagromadzenie płynu wokół oczu i pod linią szczęki.

2. MASAŻ TKANEK GŁĘBOKICH

Wykorzystuje głęboki nacisk w dłuższych odstępach czasu, zmniejszając napięcie mięśni twarzy. Idealnie nadaje się do masażu policzków i obszaru ponad linią szczęki.

3. MASAŻ PUNKTÓW SPUSTOWYCH

Wykorzystuje naprzemienne poziomy nacisku, skutecznie rozluźniając napiętą tkankę mięśniową. Idealnie sprawdza się przy masażu szyi.

4. MASAŻ SHIATSU

Wykorzystuje pulsujący nacisk, który sprzyja emocjonalnemu i fizycznemu uspokojeniu oraz redukuje zmęczenie. Doskonale sprawdza się w przypadku masażu czoła i skroni.

5. MASAŻ REFLEKSOLOGICZNY

Wykorzystuje zróżnicowany nacisk (od delikatnego do mocnego), pozwalając Ci się zrelaksować lub przywrócić naturalny poziom energii. Zalecany do stosowania w obszarze między brwiami oraz przed uszami.

3. JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY TRYBAMI MASAŻU A KURACJAMI?

Kuracje dostępne w aplikacji FOREO For You to procedury ze wskazówkami wideo, które dotyczą określonych części twarzy. Natomiast tryby masażu to procedury masażu ręcznego, które można stosować na dowolnej części twarzy, bez aplikacji.

4. JAK MOGĘ DOSTOSOWAĆ POZIOMY INTENSYWNOŚCI PULSACJI T-SONIC™, OGRZEWANIA ORAZ MIKROPRĄDÓW?

Urządzenie LUNA™ 4 plus udostępnia 16 różnych poziomów intensywności oczyszczania i mikroprądów do wyboru – połącz swoje urządzenie z aplikacją FOREO przez Bluetooth, aby dostosować i wybrać preferowane ustawienie. Możesz również wybrać niską, średnią lub wysoką temperaturę oraz światło stałe lub pulsacyjne.

5. JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY STAŁYM A PULSACYJNYM ŚWIATŁEM LED?

Zarówno stałe, jak i pulsacyjne, czerwone światło LED pomoże udoskonalić Twoją cerę – wykazano jednak, że pulsacyjne światło LED w jeszcze większym stopniu stymuluje produkcję kolagenu.

6. JAK ZMIENIĆ TRYB PRACY URZĄDZENIA?

Po naciśnięciu przycisku zasilania urządzenie automatycznie włączy normalny tryb oczyszczania. Aby przełączać się między trybami delikatnego i głębokiego oczyszczania, wystarczy nacisnąć przyciski  lub  buttons.

W trybie oczyszczania szybko naciśnij dwa razy przycisk zasilania, aby aktywować tryb masażu ujędrniającego; możesz także z łatwością zmieniać preferowane tryby masażu, naciskając przyciski  lub .

7. JAKIE SĄ RÓŻNICE MIĘDZY URZĄDZENIAMI LUNA™ 4 plus SENSITIVE a LUNA™ 4 plus NORMAL?

Urządzenie LUNA™ 4 plus wyposażone jest w 2 szczotki zaprojektowane specjalnie dla Twojej skóry;

- 1) model LUNA™ 4 Sensitive do skóry wrażliwej ma cienkie włosie do oczyszczania skóry podatnej na stany zapalne, zaczerwienienia, swędzenie i suchość.
- 2) Model LUNA™ 4 Normal do skóry normalnej ma grubsze włosie przeznaczone dla zdrowej skóry odznaczającej się doskonałą równowagą hydrolipidową, niesprawiającej wrażenia ani zbyt suchej, ani zbyt tłustej.

8. JAKIE SĄ RÓŻNICE MIĘDZY URZĄDZENIAMI LUNA™ 4 plus a LUNA™ 3 plus?

System ogrzewania w urządzeniu LUNA™ 4 plus został ulepszony, umożliwiając ogrzewanie w bliskiej podczerwieni z wykorzystaniem dodatkowego czerwonego światła LED dla uzyskania dodatkowych korzyści dla skóry. W urządzeniu LUNA™ 4 plus zastosowano również delikatniejszy silikon oraz konfigurowalne tryby oczyszczania i masażu, do których można uzyskać dostęp w trybie offline. Oprócz dostępnego już w modelu LUNA™ 3 plus masażu wspomaganego aplikacją model LUNA™ 4 plus udostępnia 5 różnych wariantów masażu do wyboru. Urządzenie LUNA™ 4 plus jest również wyposażone w funkcję blokady podróżnej, dlatego można bez obaw zabrać je ze sobą na wakacje.

© 2022 FOREO AB. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE / TOUS DROITS RÉSERVÉS.

DYSTRYBUCJA W UE: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 SZTOKHOLM, SZWECJA.

DYSTRYBUCJA W USA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

DYSTRYBUCJA W AUSTRALII: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

PRODUKT ZAPROJEKTOWANY I OPRACOWANY PRZEZ FOREO SWEDEN.

WYPRODUKOWANO DLA FOREO AB.