


QR-7102

Willkommen bei BarberBoss und herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Neukauf! Sichern Sie sich Ihre Sorgenfreiheit, indem Sie Ihre 12-monatige Garantie aktivieren und weitere 6 Monate kostenlos unter www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty anfordern. Über unsere Garantie hinaus sind Sie auch durch die gesetzlichen Verbraucherrechte Ihres Landes abgedeckt, sodass Ihr Kauf vollständig geschützt ist.

Produktaufbau und Zubehör

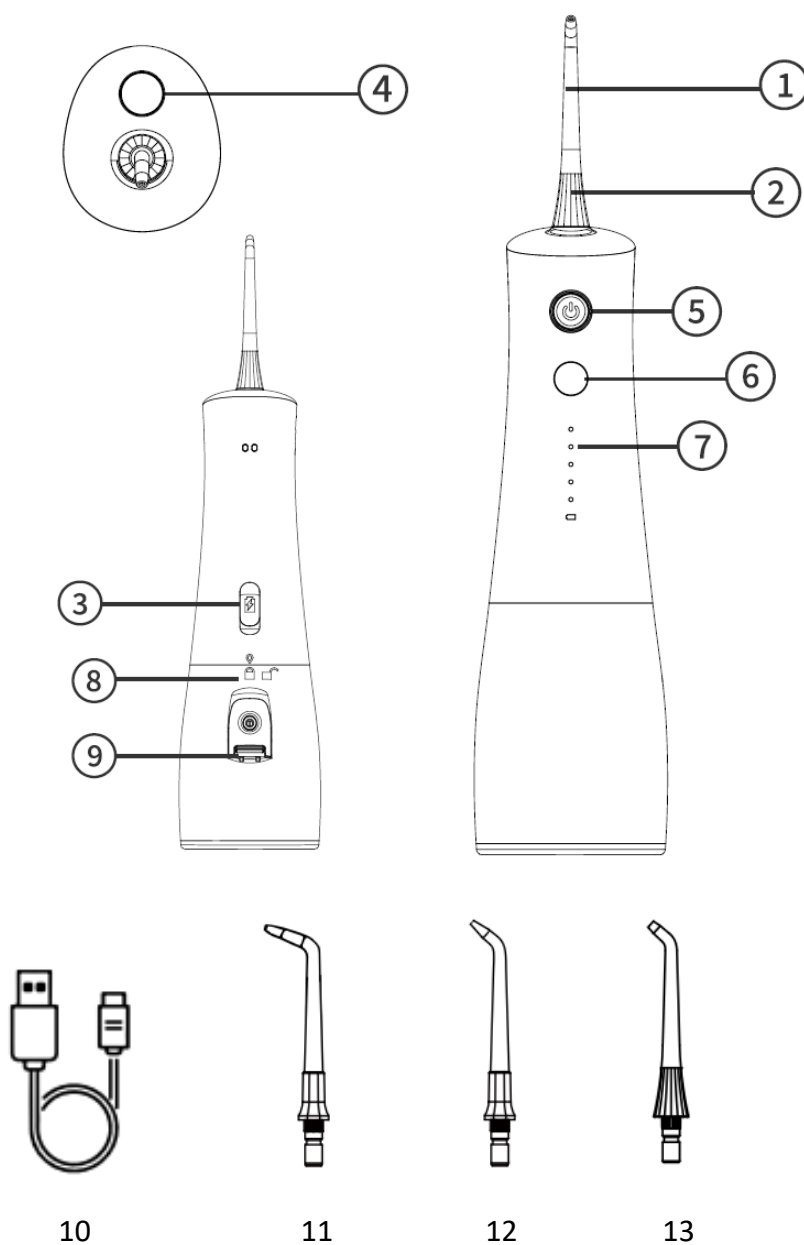

1. Düse
2. Düsendrehrad
3. USB-Ladeanschluss

4. Düsenentriegelungstaste
5. Einschalttaste
6. Modusauswahltaste
7. Modusanzeigeleuchten
8. Wassertank
9. Wassereinlass
10. USB-Ladekabel
11. Kieferorthopädische Spitze
12. Parodontal Spitze
13. Standard Spitze

Produktdetails

Produktname	QR-7102 Munddusche
Modellnummer	QR-7102
Ladeeingang	5V 1,0A
Wassertankkapazität	340ml
Ladezeit	6 Stunden
Nutzungsdauer	Bis zu 60 Tage

Was ist Inbegriffen

Wasserflosser	x1
Standard Spitze	x2
Kieferorthopädische Spitze	x1
Parodontal Spitze	x1
Ladekabel	x1

Düsenspitzen: Funktion und Verwendung

Düsentyp	Verwendung	Empfohlenes Austauschintervall
Standard Spitze	Ideal für die tägliche Reinigung und Entfernung von Speiseresten zwischen Zähnen und Zahnfleisch.	Alle 3 Monate
Kieferorthopädische Spitze	Entwickelt für die Reinigung um Zahnspangen, Brackets und andere kieferorthopädische Geräte.	Alle 3 Monate

Parodontal Spitze	Reinigt sanft tief unter dem Zahnfleischrand, um Zahnfleischerkrankungen zu behandeln und die Gesundheit zu verbessern.	Alle 3 Monate
-------------------	---	---------------

Gebrauchsanweisung

1. Ein-/Ausschalten:

- **Beginnen Sie mit der Zahnseide-Anwendung:** Setzen Sie die Spitze ein und drücken Sie dann den Einschaltknopf, um mit der Spülung zu beginnen. Das Gerät verfügt über einen 2-minütigen Auto-Stopp-Timer oder kann manuell durch erneutes Drücken des Einschaltknopfs ausgeschaltet werden.
- **Ausschalten:** Wenn Sie fertig sind, drücken Sie den Einschaltknopf, um das Gerät auszuschalten.
- **Entleeren und Ablassen:** Entleeren Sie das restliche Wasser aus dem Tank und lassen Sie das Gerät dann 2-3 Sekunden lang laufen, um das Restwasser abzulassen.

2. Einsetzen und Entfernen der Düse:

- Setzen Sie die Düse oben in den Griff der Munddusche ein und drücken Sie fest, bis Sie ein Klickgeräusch hören. Das bestätigt, dass die Düse fest sitzt (Abbildung 1).
- Um die Düse zu entfernen, drücken Sie den Entriegelungsknopf der Düsen Spitze und ziehen Sie die Düse vorsichtig heraus (Abbildung 1).
- **Hinweis:**
 - Drücken Sie den Entriegelungsknopf der Spitze nicht, während das Gerät in Betrieb ist.
 - Wenn der Düsenkopf nicht sofort nach dem Einschalten des Geräts Wasser versprüht (insbesondere nach dem ersten Gebrauch oder längerer Inaktivität), befolgen Sie die Schritte: 1. Geben Sie eine kleine Menge Wasser in den Einführbereich der Spitze (Abbildung 2). 2. Setzen Sie eine neue Spitze ein und drücken Sie den Einschaltknopf, um das Gerät zu aktivieren.

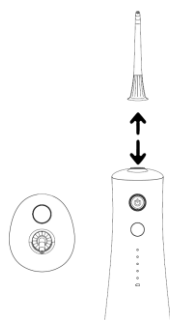


Abbildung 1

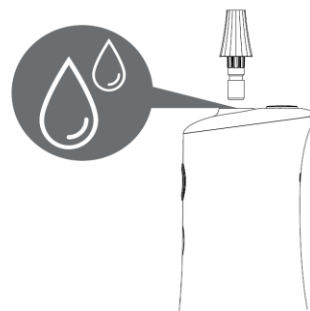


Abbildung 2

3. Wassertank Installieren und Füllen:

- Öffnen Sie den Deckel des Wassertanks, füllen Sie Wasser ein und schließen Sie den Deckel wieder fest (Abbildung 3).
- Um den Wassertank abzunehmen oder anzubringen, drehen Sie ihn einfach:
 - Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.
 - Halten Sie den Wassertank mit der linken Hand fest und drehen Sie den oberen Teil mit der rechten Hand nach rechts, um ihn abzunehmen.
 - Um ihn wieder anzubringen, drehen Sie ihn in die entgegengesetzte Richtung.
- **Hinweis:** Verwenden Sie zum Befüllen des Tanks nur Wasser oder eine vom Zahnarzt empfohlene Lösung.

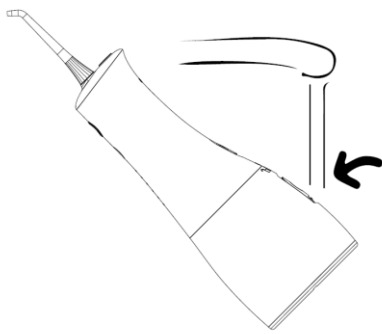


Abbildung 3

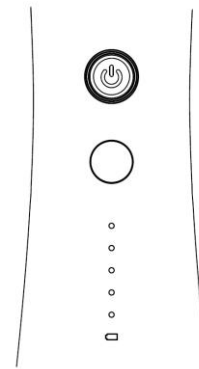


Abbildung 4

4. Druckmoduseinstellungen:

Diese Munddusche bietet 5 Druckmodi, die einfach durch Drücken der Modusauswahltaste (Abbildung 4) unter dem Einschaltknopf eingestellt werden können.

Die Druckeinstellungen sind wie folgt:

- **Sanft:** Ideal für Anfänger mit sanftem Wasserdruck.
- **Mittel:** Tägliche effiziente Reinigung
- **Stark:** Starker Wasserdruck für hartnäckige Flecken.
- **Benutzerdefiniert:** Wechseln Sie in den benutzerdefinierten Modus, schalten Sie das Gerät ein und halten Sie die Modustaste gedrückt, bis die Anzeige blinkt. Der Wasserdruck wird um 7 Stufen erhöht – lassen Sie die Taste bei der gewünschten Einstellung los, um sie zu speichern.
- **Jet:** Einfach zu verwenden, Wasser fließt nur, wenn die Ein-/Aus-Taste gedrückt wird.

Hinweis: Überprüfen Sie den eingestellten Modus mit der entsprechenden Modusanzeigeleuchte.

5. Reisesperre:

Um die Reisesperre zu aktivieren oder zu deaktivieren, halten Sie die Einschalttaste 5 Sekunden lang gedrückt, bis alle Anzeigeleuchten einmal blinken.

6. So Laden Sie:

Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel direkt an das Gerät an. Stecken Sie den USB-Stecker dann in einen 5V1A-USB-Adapter. Das Produkt muss über einen Laptop/Computer/eine Powerbank/einen USB-Anschluss aufgeladen werden (Abbildung 5). Ziehen Sie nach dem Laden den Netzstecker aus der USB-Buchse und entfernen Sie dann den USB-Stecker aus dem Produkt.

- Laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch und nach längerer Nichtbenutzung vollständig auf.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Laden ausgeschaltet ist.
- Die LED-Leuchte leuchtet auf und bestätigt, dass Ladevorgang begonnen hat.
- Eine vollständige Aufladung dauert etwa 6 Stunden und ermöglicht bis zu 60 Tage Betrieb. Für eine optimale Leistung verwenden Sie das Gerät am besten, wenn es vollständig aufgeladen ist.

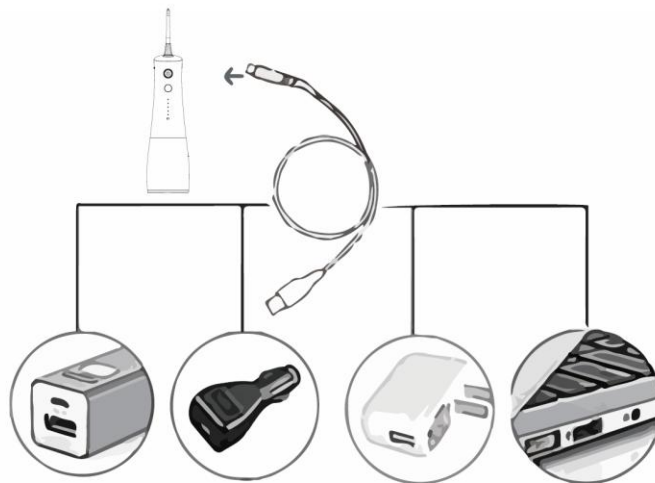


Abbildung 5

Reinigung und Wartung

Bitte beachten: Obwohl dieses Gerät wasserdicht ist (Schutzklasse IPX8), tauchen Sie es nicht für längere Zeit in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, die die angegebene Tiefe und Dauer überschreiten. Um optimale Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass das Produkt vor dem nächsten Gebrauch gereinigt und gründlich getrocknet wird.

- Stellen Sie vor dem Reinigen sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und von allen Ladekabeln getrennt ist.
- Leeren Sie den Wassertank nach jedem Gebrauch und lassen Sie das Gerät 2-3 Sekunden lang laufen, um das restliche Wasser abzulassen und Bakterienbildung zu verhindern.
- Reinigen Sie das Gerät immer nur mit Wasser oder neutralen Reinigungsmitteln. Verwenden Sie niemals ätzende oder scheuernde Substanzen (z. B. Essig, Kalkentferner), da diese das Gerät beschädigen können.
- Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung fern.

- Tauchen Sie das Gerät nicht für längere Zeit in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Wischen Sie das Gerät bei Bedarf mit einem weichen Tuch und einem milden, nicht scheuernden Reinigungsmittel ab.
- Reinigen Sie den Wassertank mit Seifenlauge, entfernen Sie Schmutz mit einer Bürste und wischen Sie ihn trocken.
- Stellen Sie sicher, dass der Wassertank vollständig trocken ist, bevor Sie das Gerät für längere Zeit lagern.

Vorsichtsmaßnahmen

Laden:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie das Ladekabel anschließen. Ziehen Sie nicht gewaltsam am Netzkabel oder am Gerät.
- Schließen Sie das Netzkabel immer zuerst an das Produkt an und stecken Sie es dann in die Steckdose.
- Wenn das USB-Kabel versehentlich ins Wasser fällt, ziehen Sie zuerst den Adapter ab, bevor Sie das Produkt herausnehmen.
- Ziehen Sie den Adapter nicht mit nassen Händen ab.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem angegebenen Spannungssystem am Gerät oder Ladegerät, um Schäden zu vermeiden.
- Verhindern Sie ein Überladen, indem Sie das Gerät ausstecken, sobald die angegebene Ladezeit erreicht ist.
- Halten Sie das Produkt während des Ladevorgangs immer von Wasserquellen fern. Vermeiden Sie das Laden in der Nähe von Badewannen, Waschbecken oder Flüssigkeitsbehältern.
- Laden Sie das Gerät nicht auf weichen Oberflächen wie Betten oder Bettzeug, insbesondere nicht in geschlossenen Räumen. Sollte das Produkt während des Ladevorgangs überhitzen, trennen Sie es sofort vom Stromnetz.
- Vermeiden Sie das Laden in Bereichen mit hohen Temperaturen oder in der Nähe von offenen Flammen, um Brandgefahr zu verringern.
- Beschädigen, brechen oder modifizieren Sie das USB-Kabel nicht. Vermeiden Sie übermäßiges Dehnen, Biegen oder Verdrehen und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf und klemmen Sie es nicht zwischen Gegenständen ein.
- Wenn das Netzkabel beschädigt wird, ersetzen Sie es nur durch kompatible Kabel oder Komponenten des Originalherstellers.

Verwendung:

- Dieses Produkt ist ausschließlich für die Reinigung von Zahnfleisch und Zähnen bestimmt. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie die Düse verlieren, und verwenden Sie nur empfohlene Spitzen und Zubehör.
- Drücken Sie die Düse nicht zu fest gegen Zähne oder Zahnfleisch, um Verletzungen zu vermeiden.
- Personen mit Zahn- oder Zahnfleischschmerzen können das Gerät möglicherweise nicht verwenden und sollten vor der Verwendung ihren Zahnarzt konsultieren.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie offene Wunden im Mund oder auf der Zunge haben.

- Halten Sie Ihren Mund während der Verwendung des Geräts geschlossen, um Spritzwasser zu vermeiden. Spülen Sie die Zähne nicht aus der Ferne und richten Sie kein Wasser auf Ihren Körper oder Ihr Gesicht.
- Führen Sie keine Fremdkörper in die Öffnungen des Produkts ein.
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien, in der Nähe von Aerosolsprays oder in Bereichen, in denen Sauerstoff verabreicht wird.
- Verwenden Sie in diesem Produkt Jod, keine Kochsalzlösung oder wasserunlösliche konzentrierte ätherische Öle.
- Die Verwendung dieser Produkte kann die Leistung beeinträchtigen und die Lebensdauer des Produkts verkürzen und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Entfernen Sie vor der Verwendung dieses Produkts jeglichen Mundschmuck. Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder beschädigt ist, schalten Sie es sofort aus und vermeiden Sie eine unbefugte Demontage.
- Dieses Gerät ist wasserdicht (Schutzklasse IPX8), tauchen Sie es jedoch nicht für längere Zeit in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Fehlfunktionen, Feuer, Stromschlag oder Explosionen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig trocken ist, bevor Sie es lagern, damit die Funktionalität erhalten bleibt.
- Wir empfehlen, die Lagerung in feuchten, feuchten Bereichen oder bei hohen Temperaturen zu vermeiden. Setzen Sie das Produkt keinem Feuer oder extremer Hitze aus.

Sicherheit:

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, allerdings wird zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs eine Aufsicht empfohlen. Bewahren Sie das Gerät immer außerhalb der Reichweite unbeaufsichtigter Kinder auf, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen, da dieses Gerät kein Spielzeug ist.
- Leiten Sie kein Wasser unter die Zunge, ins Ohr, in die Nase oder in andere empfindliche Bereiche. Dieses Gerät kann einen hohen Wasserdruck erzeugen, der in diesen Bereichen ernsthafte Schäden verursachen kann. Außerdem kann die tödliche Amöbe *Naegleria fowleri* in manchen Leitungswässern oder nicht gechlortem Brunnenwasser vorhanden sein und könnte tödlich sein, wenn sie in diese Bereiche geleitet wird.
- Bewahren Sie das Gerät, das Kabel und die Düse außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf. Die Düse ist so klein, dass sie verschluckt werden kann und im Hals stecken bleiben kann.
- Um zu verhindern, dass sich die Batterie erhitzt oder giftige und schädliche Substanzen freisetzt, öffnen, modifizieren, beschädigen oder zerlegen Sie das Produkt oder die Batterie niemals.

Fehlerbehebung:

Frage	Ursachen	Lösungen
Wassertank leckt	Dichtungsring ist abnormal	Dichtungsring entfernen und neu installieren
	Schwache Batterie	Gerät aufladen

Niedriger Wasserdruck	Düsenkopf verstopft	Durch neuen Düsenkopf ersetzen
	Schmutz oder Ablagerungen stecken in der Düse	
Hält selbst nach vollständigem Laden nur wenige Minuten	Leere Batterie	Kontaktieren Sie das Servicecenter für Hilfe
	Unzureichende Ladezeit	Laden Sie das Gerät mindestens 6 Stunden lang auf
	Ladekabel beschädigt	Versuchen Sie, das Gerät mit einem neuen Ladekabel aufzuladen
	Adapter defekt	Versuchen Sie den neuen Adapter
Motor macht Geräusche, aber es kommt kein Wasser	Wassertank ist leer	Wassertank füllen
	Saugventil falsch ausgerichtet	Gerät eingeschaltet lassen und Wasser bis zur Öffnung füllen, wo der Düsenkopf hineingeht
	Düsenkopf verstopft	Durch neue Spitzen ersetzen
Motor macht kein Geräusch	Schwache Batterie	Aktivieren Sie die Batterie, indem Sie das Gerät länger als 16 Stunden aufladen
Produkt funktioniert plötzlich nicht mehr	Überhitzungsschutz ist aktiviert (kontinuierlich 5 Tanks Wasser bei höchstem Druck verwendet)	Übermäßige Hitze führt dazu, dass das Gerät stoppt. Gerät ausschalten, 2 Stunden abkühlen lassen und neu starten
	2-minütiges Anti-Fehlberührungs-Design des Produkts	Neustart zur Verwendung

Umweltschutz und Recycling

Sichere Entsorgung des Geräts

Dieses Gerät enthält eine Lithiumbatterie. Am Ende ihrer Lebensdauer darf die Batterie nicht als Hausmüll entsorgt werden. Sie muss zu einer Sondersammelstelle für getrennte Abfälle oder zu einem Händler gebracht werden, der diesen Service anbietet. Durch die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgeräts werden mögliche negative Folgen für die Umwelt und die Gesundheit vermieden, die sich aus einer unsachgemäßen Entsorgung ergeben. Dadurch können die enthaltenen Materialien zurückgewonnen werden, wodurch erhebliche Energie- und Ressourceneinsparungen erzielt werden.

Wie erwähnt, enthält der eingebaute Akku in diesem Produkt Stoffe, die schädlich für die Umwelt sein können. Um eine verantwortungsvolle Entsorgung und Wiederverwertung des Geräts zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die Vorschriften Ihres Landes zur getrennten Sammlung von Elektroprodukten und Batterien oder befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Aktivieren Sie den Netzschalter des Geräts und lassen Sie es laufen, bis es nicht mehr funktioniert. Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig entladen ist.
2. Stellen Sie vor dem Zerlegen des Geräts und dem Entfernen des Akkus immer sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und von allen Stromquellen getrennt ist.
3. Schließen Sie das Gerät nach dem Herausnehmen des Akkus niemals wieder an das Ladegerät an. Vermeiden Sie außerdem einen Kurzschluss zwischen den Plus- und Minuspolen des Akkus.
4. Befolgen Sie dann die Richtlinien der örtlichen Behörden zur Entsorgung des entfernten Akkus.



Zubehör

Sie brauchen Ersatzteile? Sie haben etwas verloren? Zubehör können Sie über unsere Website www.barberboss.co.uk/shop.

Kundenservice

Wenn Sie Hilfe benötigen, besuchen Sie unsere Website: www.barberboss.co.uk oder senden Sie uns eine E-Mail an care@barberboss.co.uk. Sie können uns auch unter 0800 612 6688 (oder +44800 612 6688 bei Kontakt von außerhalb des Vereinigten Königreichs) anrufen oder uns eine WhatsApp-Nachricht senden. Alternativ finden Sie auf unserem YouTube-Kanal hilfreiche Tipps/Anleitungen: www.youtube.com/@BarberBossUK.

