


QR-7025

Willkommen bei BarberBoss und herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Neukauf! Sichern Sie sich Ihre Sorgenfreiheit, indem Sie Ihre 12-monatige Garantie aktivieren und weitere 6 Monate kostenlos unter www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty anfordern. Über unsere Garantie hinaus sind Sie auch durch die gesetzlichen Verbraucherrechte Ihres Landes abgedeckt, sodass Ihr Kauf vollständig geschützt ist.


Produkteigenschaften

- **Fortschrittliche, um 360° drehbare Spitze mit Schwerkraftkugel-Design:** Einfaches Benutzen der Zahnseide in jede Richtung, sogar kopfüber, für eine gründliche Reinigung. Mit der Niederfrequenz-Technologie mit hohem Wasservolumen entfernt die Munddusche von BarberBoss effektiv Speisereste und Plaque, schützt gleichzeitig Ihr Zahnfleisch und fördert die Mundgesundheit.
- **Großzügiger 300-ml-Wassertank:** Der Tank mit großem Fassungsvermögen ermöglicht eine unterbrechungsfreie Nutzung und bietet genug Wasser für eine vollständige Sitzung, ohne dass nachgefüllt werden muss.
- **5 Reinigungsmodi mit langlebigem Akku:** Mit fünf anpassbaren Reinigungsmodi können Sie Ihre Mundpflege an Ihre Bedürfnisse anpassen und jedes Mal eine personalisierte Reinigung erhalten. Der leistungsstarke 2500-mAh-Akku sorgt für lang anhaltende Leistung und ermöglicht 20 bis 30 Tage Nutzung mit einer einzigen Ladung für problemlosen Komfort.
- **IPX7-Wasserdichtigkeit:** Die Munddusche ist nach IPX7 wasserdicht, sodass alle wichtigen Teile wie Motor, Akku und Platine sicher vor Wasserschäden geschützt sind. Dadurch ist sie langlebig und kann auch in feuchten Umgebungen sicher verwendet werden.

Produktaufbau und Zubehör

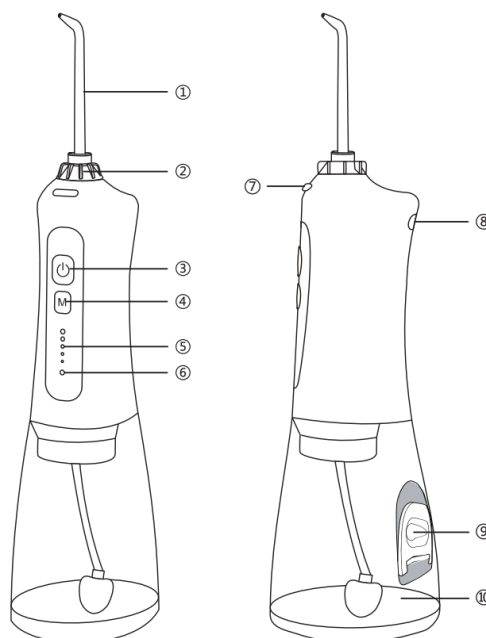

1. Düsenspitze
2. Drehknopf für Düsenspitze
3. Einschalttaste
4. Modusauswahltaste
5. Modusanzeigeleuchten
6. Ladeanzeigeleuchte
7. Tip Düsenentriegelungstaste
8. Ladeanschluss
9. Wassertankdeckel
10. Wassertank

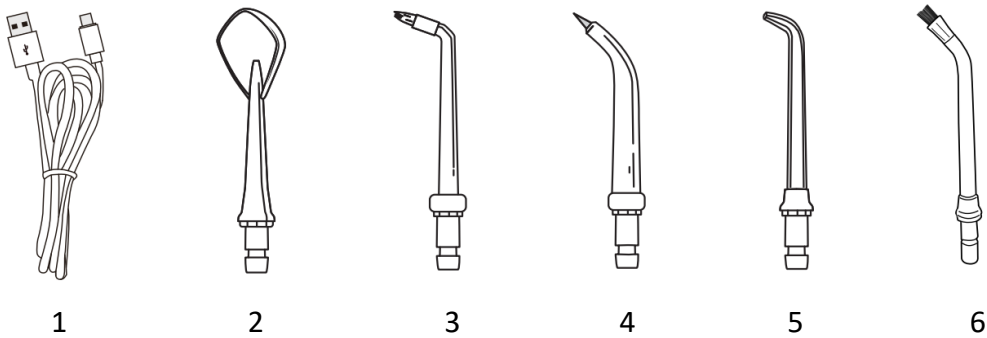

1. USB Ladekabel
2. Zungenschaber-Spitze
3. Kieferorthopädische Spitze
4. Parodontale Spitze
5. Standardspitze
6. Plaque-Seeker-Spitze

Produktdetails

Produktname	QR-7025 Munddusche
Modellnummer	QR-7025
Ladeeingang	5VDC 1.0A
Fassungsvermögen des Wassertanks	300ml
Ladezeit	5 Stunden
Nutzungsdauer	20-30 Tage

Was ist enthalten

Munddusche	x1
Standardspitze	x2
Kieferorthopädische Spitze	x1
Parodontalspitze	X1

Zungenschaberspitze	x1
Plaquesucherspitze	x1
Ladekabel	x1

Düsenspitzen: Funktion und Verwendung


Düsentyp	Verwendung	Empfohlenes Austauschintervall
Standard Spitze	Ideal für die tägliche Reinigung und Entfernung von Speiseresten zwischen Zähnen und Zahnfleisch.	Alle 6 Monate
Kieferorthopädische Spitze	Entwickelt für die Reinigung rund um Zahnspangen, Brackets und andere kieferorthopädische Geräte.	Alle 3 Monate
Parodontale Spitze	Reinigt sanft tief unter dem Zahnfleischrand, um Zahnfleischerkrankungen zu behandeln und die Gesundheit zu verbessern.	Alle 3 Monate
Zungenreiniger Spitze	Hilft, Bakterien und Ablagerungen von der Zunge zu entfernen und sorgt für einen frischeren Atem.	Alle 6 Monate
Plaque-Sucher Spitze	Zielt auf die Entfernung schwer erreichbarer Plaques rund um Implantate, Kronen und Brücken.	Alle 6 Monate

Gebrauchsanweisung


1. Ein-/Ausschalten:

- **Beginnen Sie mit der Zahnseide-Anwendung:** Setzen Sie die Spitze ein und drücken Sie dann den Einschaltknopf, um mit der Spülung zu beginnen. Das Gerät verfügt über einen 2-minütigen Auto-Stopp-Timer oder kann manuell durch erneutes Drücken des Einschaltknopfs ausgeschaltet werden.

- **Ausschalten:** Wenn Sie fertig sind, drücken Sie den Einschaltknopf, um das Gerät auszuschalten.
 - **Entleeren und ablassen:** Entleeren Sie das restliche Wasser aus dem Tank und lassen Sie das Gerät dann 2-3 Sekunden lang laufen, um das Restwasser abzulassen.
2. Einsetzen und Entfernen der Düse:
- Setzen Sie die Düse oben in den Griff der Munddusche ein und drücken Sie fest, bis Sie ein Klicken hören. Dadurch wird bestätigt, dass die Düse fest sitzt (Abbildung 1).
 - Um die Düse zu entfernen, drücken Sie den Entriegelungsknopf der Düse und ziehen Sie die Düse vorsichtig heraus.
 - **Hinweis:**
 - Drücken Sie den Entriegelungsknopf der Düse nicht, während das Gerät in Betrieb ist.
 - Wenn der Düsenkopf nicht sofort nach dem Einschalten des Geräts Wasser versprüht (insbesondere nach dem ersten Gebrauch oder längerer Inaktivität), befolgen Sie diese Schritte: 1. Geben Sie eine kleine Menge Wasser in den Einführbereich der Düse (Abbildung 2). 2. Setzen Sie eine neue Düse ein und drücken Sie den Einschaltknopf, um das Gerät zu aktivieren.

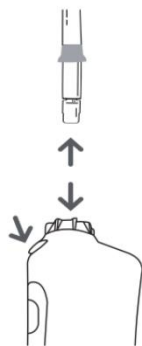


Figur 1

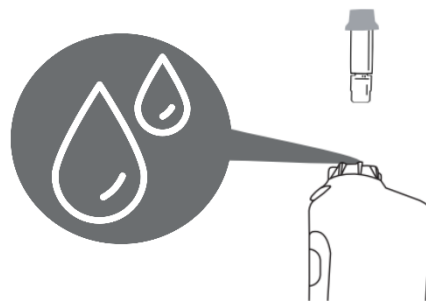


Figur 2

3. Wassertank installieren und füllen:
- Öffnen Sie den Deckel des Wassertanks, füllen Sie Wasser ein und schließen Sie den Deckel wieder fest (Abbildung 3).
 - Um den Wassertank abzunehmen oder anzubringen, drehen Sie ihn einfach.
 - Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.
 - Halten Sie den Wassertank mit der linken Hand fest und drehen Sie den oberen Teil mit der rechten Hand nach rechts, um ihn abzunehmen.
 - Um ihn wieder anzubringen, drehen Sie ihn in die entgegengesetzte Richtung (Abbildung 4).
 - **Hinweis:** Verwenden Sie zum Befüllen des Tanks nur Wasser oder eine vom Zahnarzt empfohlene Lösung.

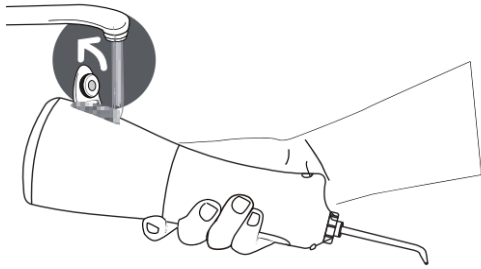

Figur 3

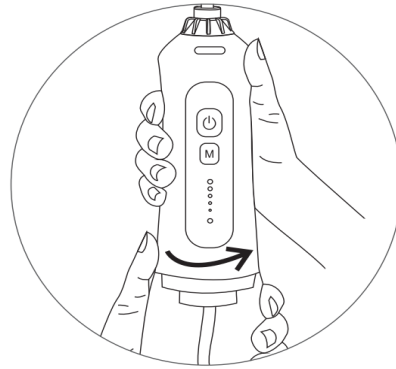

Figur 4


4. Druckmoduseinstellungen:

Diese Munddusche bietet 5 Druckmodi, die einfach durch Drücken der Taste „M“ eingestellt werden können. Die Druckeinstellungen sind wie folgt:

- **Höchster Druck (110 PSI):** Kraftvolle Reinigung
- **Starker Druck:** Tiefenreinigung
- **Normaler Druck:** Tägliche Reinigung
- **Sanfter Druck:** Für empfindliche Zähne
- **Niedriger Druck (40 PSI):** Ideal für Anfänger

5. So laden Sie auf

- Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel direkt an das Gerät an. Stecken Sie den USB-Anschluss dann in einen 5V1A-USB-Adapter. Das Produkt muss über den USB-Anschluss eines Laptops/Computers/einer Powerbank aufgeladen werden (Abbildung 5). Entfernen Sie nach dem Aufladen den Netzstecker aus der USB-Buchse und entfernen Sie dann den USB-Anschluss aus dem Produkt.
 - Laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch und nach längerer Nichtbenutzung vollständig auf.
 - Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Laden ausgeschaltet ist.
 - Die LED leuchtet auf und bestätigt, dass der Ladevorgang begonnen hat.
 - Eine vollständige Aufladung dauert 3–5 Stunden und ermöglicht bis zu 30 Tage Betrieb. Für optimale Leistung verwenden Sie das Gerät am besten, wenn es vollständig aufgeladen ist.

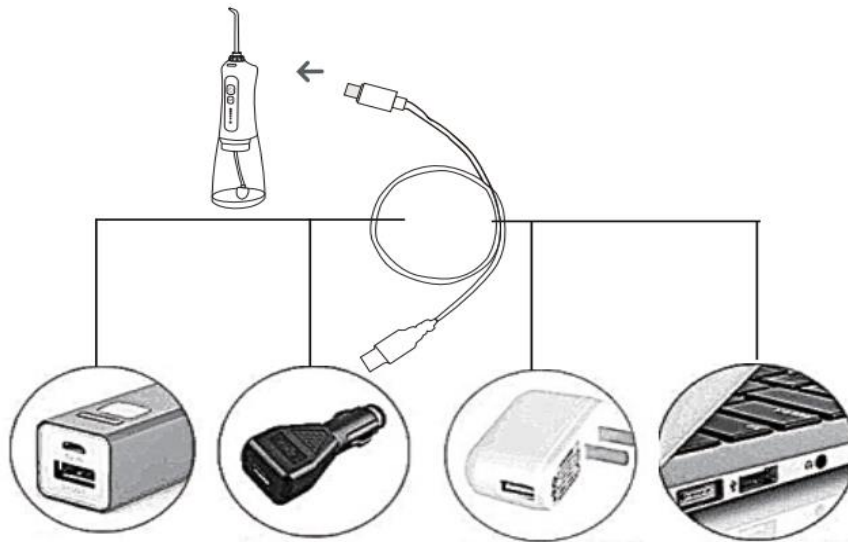

Figur 5

Reinigung & Wartung

Bitte beachten: Obwohl dieses Gerät wasserdicht ist (Schutzklasse IPX7), tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Um optimale Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass das Produkt vor dem nächsten Gebrauch gereinigt und gründlich getrocknet wird.

- Stellen Sie vor dem Reinigen sicher, dass das Gerät AUSGESCHALTET und von allen Ladekabeln getrennt ist.
- Leeren Sie den Wassertank nach jedem Gebrauch und lassen Sie das Gerät 2–3 Sekunden lang laufen, um das restliche Wasser abzulassen und Bakterienbildung zu verhindern.
- Reinigen Sie das Gerät immer nur mit Wasser oder neutralen Reinigungsmitteln. Verwenden Sie niemals ätzende oder scheuernde Mittel (z. B. Essig oder Kalkentferner), da diese das Gerät beschädigen können.
- Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Wischen Sie das Gerät bei Bedarf mit einem weichen Tuch und einem milden, nicht scheuernden Reinigungsmittel ab.
- Reinigen Sie den Wassertank mit Seifenlauge. Entfernen Sie mit einer Bürste jeglichen Schmutz im Inneren und wischen Sie ihn mit einem Tuch sauber.
- Stellen Sie sicher, dass der Wassertank vollständig trocken ist, bevor Sie das Gerät für längere Zeit lagern.

Vorsichtsmaßnahmen

Aufladen:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie das Ladekabel anschließen. Vermeiden Sie es, gewaltsam am Stromkabel oder am Gerät zu ziehen.

- Schließen Sie das Netzkabel immer zuerst an das Produkt und dann an die Steckdose an.
- Wenn das USB-Kabel versehentlich ins Wasser fällt, ziehen Sie zuerst den Adapter ab, bevor Sie das Produkt herausnehmen.
- Ziehen Sie den Adapter nicht mit nassen Händen ab.
- Schließen Sie dieses Gerät nicht an ein Spannungssystem an, das sich von dem spezifischen Spannungssystem des Geräts oder Ladegeräts unterscheidet.
- Verhindern Sie ein Überladen, indem Sie das Gerät ausstecken, sobald die angegebene Ladezeit erreicht ist.
- Halten Sie das Produkt während des Ladevorgangs stets von Wasserquellen fern und laden Sie es nicht in der Nähe von Badewannen, Waschbecken oder Flüssigkeitsbehältern auf.
- Laden Sie es nicht auf weichen Oberflächen wie Betten und Bettzeug auf, insbesondere nicht in geschlossenen Räumen. Sollte das Produkt während des Ladevorgangs überhitzen, trennen Sie es sofort vom Stromnetz.
- Vermeiden Sie das Laden in Bereichen mit hohen Temperaturen oder in der Nähe von offenen Flammen, um Brandrisiken zu verringern.
- Vermeiden Sie es, das USB-Kabel zu beschädigen, zu brechen oder zu modifizieren. Dehnen, biegen oder verdrehen Sie das USB-Kabel nicht übermäßig und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf oder klemmen Sie zwischen Gegenständen ein.
- Wenn das Netzkabel beschädigt wird, ersetzen Sie es nur durch kompatible Kabel oder Komponenten, die direkt vom Originalhersteller erworben wurden.

Verwendung:

- Dieses Produkt ist ausschließlich für die Reinigung von Zahnfleisch und Zähnen bestimmt. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie die Düse verlieren.
- Verwenden Sie nur empfohlene Spitzen und Zubehör.
- Drücken Sie die Düse nicht zu fest gegen Ihre Zähne oder Ihr Zahnfleisch, da dies zu Verletzungen führen kann.
- Personen mit Zahn- oder Zahnfleischschmerzen können das Gerät möglicherweise nicht verwenden und sollten vor der Verwendung ihren Zahnarzt konsultieren.
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien oder an Orten, an denen Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder Sauerstoff verabreicht wird.
- Verwenden Sie in diesem Produkt kein Jod, keine Kochsalzlösung oder wasserunlösliche konzentrierte ätherische Öle. Die Verwendung dieser Produkte kann die Leistung beeinträchtigen und die Lebensdauer des Produkts verkürzen. Die Verwendung dieser Produkte kann zum Erlöschen der Garantie führen.
- Entfernen Sie vor der Verwendung dieses Produkts jeglichen Mundschmuck.
- Wenn das Gerät eine Fehlfunktion oder Beschädigung aufweist, schalten Sie es sofort aus und vermeiden Sie eine unbefugte Demontage.
- Dieser Trimmer ist wasserdicht (Schutzklasse IPX7), tauchen Sie das Produkt jedoch nicht in Wasser, um Fehlfunktionen, Feuer, Stromschlag oder Explosion zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Lagerung vollständig trocken ist, um seinen Zustand und seine Funktionalität zu erhalten.

- Wir empfehlen, die Lagerung in feuchten, feuchten Bereichen und bei hohen Temperaturen zu vermeiden. Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer und erhitzen Sie es nicht.

Sicherheit:

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, allerdings wird zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs eine Aufsicht empfohlen. Bewahren Sie das Gerät stets außerhalb der Reichweite unbeaufsichtigter Kinder auf, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen, da es sich bei diesem Gerät nicht um ein Spielzeug handelt.
- Leiten Sie kein Wasser unter die Zunge, ins Ohr, in Nase oder in andere empfindliche Bereiche. Dieses Produkt kann Druck erzeugen, in diesen Bereichen ernsthafte Schäden verursachen kann. Außerdem kann die tödliche Amöbe *Naegleria fowleri* in manchen Leitungswässern oder nicht gechlortem Brunnenwasser vorhanden sein und tödlich sein, wenn sie in diese Bereiche geleitet wird.
- Bewahren Sie das Gerät, das Kabel und die Düse außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf. Die Düse ist so klein, dass sie verschluckt werden kann und im Hals stecken bleiben kann.

Fehlerbehebung:

Frage	Ursachen	Lösungen
Wassertank leckt	Dichtungsring ist abnormal	Dichtungsring entfernen und neu installieren
Niedriger Wasserdruck	Schwache Batterie	Gerät aufladen
	Düsenkopf verstopft	Durch neuen Düsenkopf ersetzen
	Schmutz oder Ablagerungen stecken in der Düse fest	
Hält selbst nach vollständiger Aufladung nur wenige Minuten	Leere Batterie	Wenden Sie sich für Unterstützung an das Servicecenter
	Unzureichende Ladezeit	Laden Sie das Gerät mindestens 5 Stunden lang auf
	Ladekabel beschädigt	Versuchen Sie, das Gerät mit einem neuen Ladekabel aufzuladen
	Adapter defekt	Versuchen Sie den neuen Adapter
Motor macht	Wassertank ist leer	Wassertank füllen

Geräusche, aber es kommt kein Wasser heraus	Saugventil verrutscht	Gerät eingeschaltet lassen, Wasser bis zur Öffnung füllen, in die der Düsenkopf hineingeht
	Düsenkopf blockiert	Durch neue Spitzen ersetzen
Motor macht kein Geräusch	Schwache Batterie	Aktivieren Sie den Akku, indem Sie das Gerät 16 Stunden lang aufladen
Produkt funktioniert plötzlich nicht mehr	Überhitzungsschutz ist aktiviert (kontinuierlich 5 Tanks Wasser mit höchstem Druck verwendet)	Übermäßige Hitze führt zum Stoppen der Maschine. Schalten Sie das Gerät aus, lassen Sie es 2 Stunden lang abkühlen und starten Sie es neu

Umweltschutz und Recycling

Sichere Entsorgung von Geräten

Am Ende seiner Lebensdauer darf die Batterie nicht als Hausmüll entsorgt werden. Sie muss zu einer Sondermüllsammelstelle einer Behörde oder zu einem Händler gebracht werden, der diesen Service anbietet. Durch die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgeräts werden mögliche negative Folgen für die Umwelt und die Gesundheit vermieden, die sich aus einer unsachgemäßen Entsorgung ergeben. Dadurch können die Bestandteile zurückgewonnen werden, wodurch erhebliche Energie- und Ressourceneinsparungen erzielt werden.

Wie bereits erwähnt, enthält der in diesem Produkt eingebaute Akku Stoffe, die für die Umwelt schädlich sein können. Um eine verantwortungsvolle Entsorgung und ein Recycling des Geräts zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die Vorschriften Ihres Landes zur getrennten Sammlung von Elektroprodukten und Batterien oder befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Aktivieren Sie den Netzschalter des Geräts und lassen Sie es laufen, bis es nicht mehr funktioniert. Stellen Sie sicher, dass die Batterie vollständig entladen ist.
2. Stellen Sie vor dem Zerlegen des Geräts und dem Entfernen der Batterie immer sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und von allen Stromquellen getrennt ist.
3. Schließen Sie das Gerät nach dem Herausnehmen der Batterie niemals wieder an das Ladegerät an. Achten Sie außerdem darauf, einen Kurzschluss zwischen den Plus- und Minuspolen der Batterie zu vermeiden.
4. Befolgen Sie anschließend die Richtlinien der örtlichen Behörden zur Entsorgung der entfernten Batterie.



Zubehör

Sie brauchen Ersatzteile? Sie haben etwas verloren? Zubehör können Sie über unsere Website www.barberboss.co.uk/shop.

Kundenservice

Wenn Sie Hilfe benötigen, besuchen Sie unsere Website: www.barberboss.co.uk oder senden Sie uns eine E-Mail an care@barberboss.co.uk. Sie können uns auch unter 0800 612 6688 anrufen oder uns eine WhatsApp-Nachricht senden. Oder besuchen Sie unser YouTube-Konto für einige hilfreiche Tipps/Anleitungen: www.youtube.com/@BarberBossUK.

